


L'AUTOMATISME POUR LES PREMIERS STADES DE L'ESCARRE



automatic
technology
BREVET

2
ANS
GARANTIE

Score sur l'Echelle de Braden

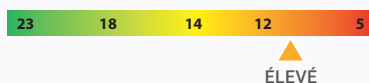

COMPATIBLE
PROGRAMME
AirCare®

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- ▶ Réglages confort
- ▶ QR code pour un accès simple et rapide aux informations produit
- ▶ Livré dans un sac de transport, prêt à l'emploi
- ▶ Démarche d'éco-conception respectueuse de l'environnement
- ▶ 2 housses disponibles : Promust PU et Promust CIC



axtairone®
PLUS

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ**.
Patient alité plus de 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2**, associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.

30 ≤ 150kg



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe D



10,88€ Forfait location hebdomadaire
- CODE 1293872 -

LES + PRODUIT

- Efficacité thérapeutique pour les premiers stades de l'escarre.
- Simplicité d'utilisation pour le personnel soignant.

HOUSSE	CARTON INDIVIDUEL
	VAXT2/ONE-P
	VAXT2/ONE/CIC-P



VANNE CPR (Cardio Pulmonary Rescue)

- ▶ Ouverture et fermeture simples et rapides
- ▶ Dégonflage du matelas en moins de 15 secondes en cas d'urgence *

* Pour un patient de 80 Kg à plat


HOUSSE

- ▶ Face supérieure : bi-élastique, imperméable aux liquides et perméable à la vapeur d'eau
- ▶ Face inférieure : base anti-dérapante
- ▶ 2 housses disponibles :

PROMUST PU et **PROMUST CIC**


BOUCHON DE TRANSPORT

Permet la mise en commun des deux voies en mode transport pour un confort d'alitement et une autonomie de 8 heures.

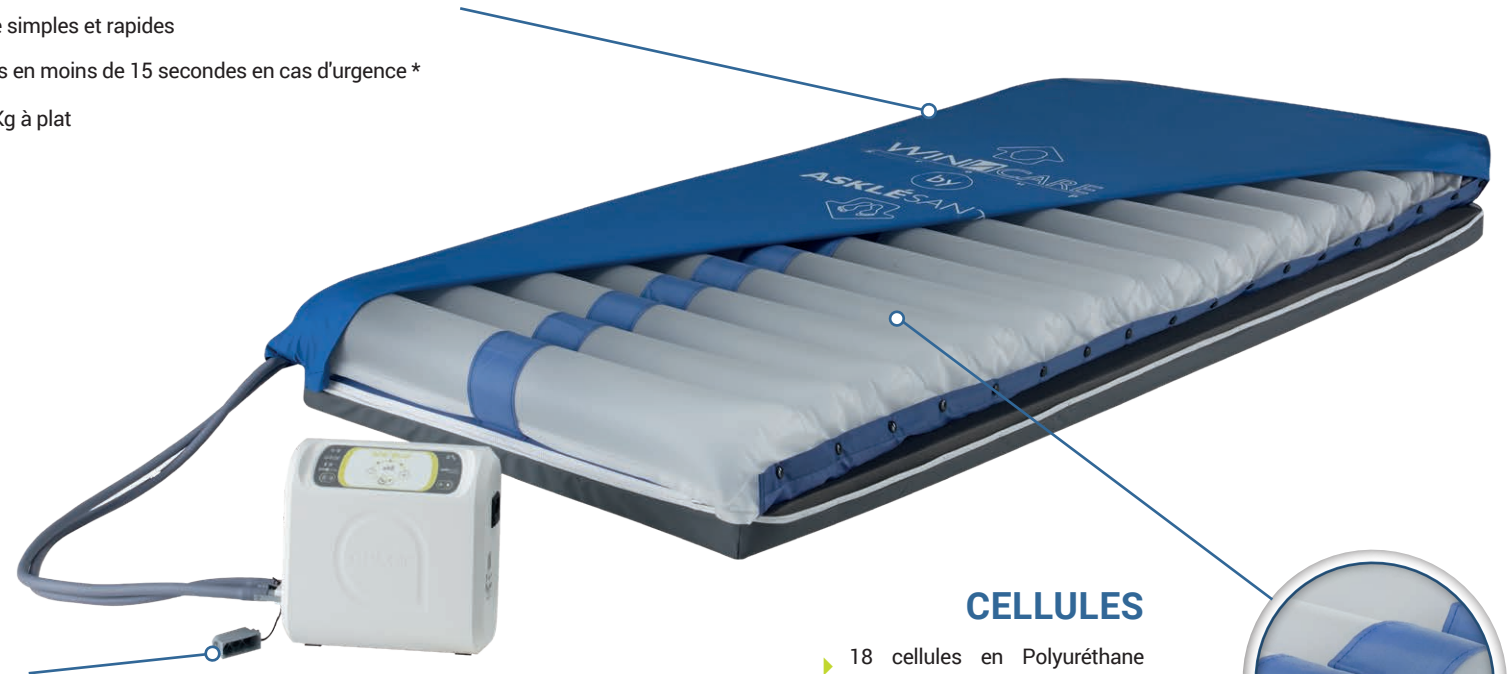

CELLULES

- ▶ 18 cellules en Polyuréthane Ether de 12 cm de hauteur d'air thérapeutique et de 300 µ d'épaisseur

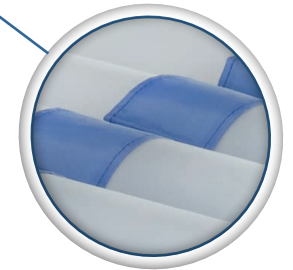

COMPRESSEUR

- Système breveté de calcul automatique et continu de la pression de gonflage en fonction de la morphologie du patient
- Mode à pression alternée ou dynamique
- Réglages confort : personnalisation du niveau de gonflage, gestion de la position assise
- Alarmes : visuelle et sonore
- Numéro de série au dos du compresseur, notice simplifiée et QR code sur les côtés
- Gestion de la maintenance avec le programme AIRCARE

