

**4 bis**



Code article : **1030000S1**  
Code ACL : 3401542608735  
Code GTIN : 3615800000708

Famille :  
**Cannes métalliques**

Description :  
**Canne de malade aluminium, poignée Maginot, finition anodisée**

Usage revendiqué :  
Les cannes métal sont des aides à la marche manipulées avec un bras.  
Leur utilisation est intérieure ou extérieure

Classe du dispositif : 1 (non invasif)

Garantie produit :  
2 ans contre tout vice de fabrication

Remboursement LPPR : 1296787  
(Canne métallique avec appui antébrachial ou poignée en T)



## Caractéristiques Techniques

### Dimensions (mm)

- Hauteur mini : 800 mm
- Hauteur maxi : 975 mm
- Epaisseur poignée : 23 mm

\* position médiane sur poignée – tolérance ± 5mm

### Description technique

- Mât : tube alu Ø 20 x 1 (roulé soudé - 5086)  
8 positions (tous les 25mm)
- Rallonge haute: tube alu Ø 17,2 x 1 (roulé soudé - 5086)
- Bague anti-jeu Ø 20 noire entre mât et rallonge
- Blocage du réglage en hauteur: cliquet simple Ø 6 mm
- Poignée Maginot noire en PP
- Embout Ø 18 anti-bruit
- Embout 19x40 noir
- Finition : anodisée


Poids du produit :

**0,265 kg**

Date de 1ère mise sur le marché :

**Mai 2004**


## Etiquetage produit

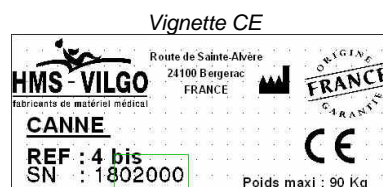

4 bis



Liste des pièces :

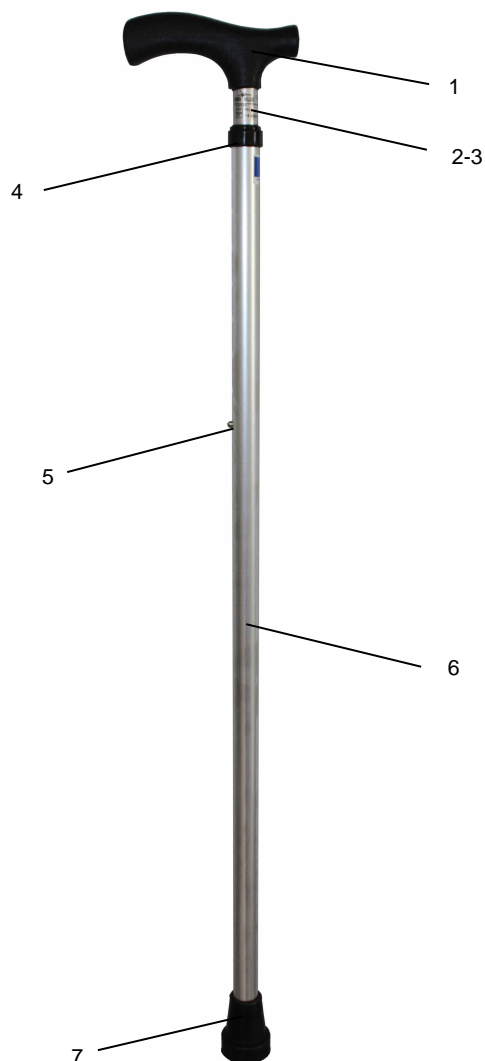

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000065	1	Poignée noire Maginot
2	E103001	1	Rallonge canne malade ano 455
3	A000035	1	Embout diam. 18 int
4	A000003	1	Bague diam. 20 noire
5	A001053	1	Cliquet simple de 6
6	E103000	1	Mât canne malade ano lg 700
7	A000218	1	Embout 19x40 noir

