


TOILETTE & BAIN

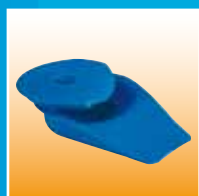

Réhausse-WC

Hygiène & Confort

Aides au bain & à la douche



PHARMAOUEST INDUSTRIES



Historique

Société familiale, créée en 1981, **Pharmaouest Industries** est l'un des tout premiers acteurs dans le domaine de l'aide à la prévention des escarres, des aides techniques, de l'hygiène et du confort de la personne dépendante.



Savoir-Faire

L'ensemble des collaborateurs de **Pharmaouest Industries** contribue chaque jour par leurs compétences et la qualité de leur travail à répondre aux problèmes posés par la dépendance.



Qualité

Reconnue pour le sérieux de son activité et le respect de ses engagements envers sa clientèle, **Pharmaouest Industries** fonde ses principes d'organisation et de développement sur l'exigence de qualité, de sécurité et de respect de l'environnement.



Fiabilité

Sur une surface de 23 000 m², un bâtiment de 6 700 m² abrite l'ensemble des outils de production. **Pharmaouest Industries** dispose d'une unité de production, entièrement sécurisée, répondant aux normes industrielles et environnementales les plus strictes.

Réhausse - wc

Réhosoft.....	4/5
Rého2fix.....	6
Réhofix.....	7
Classiques.....	8/9

Hygiène & confort

Accessoires d'hygiène.....	10/11
Bassin de confort.....	12
Urolis.....	13

Aides au bain & à la douche

Sièges de bains manuels.....	14/15
Élévateur de bain électrique «Neptune».....	16/17
Élévateur de bain électrique «Aquila».....	18/19
Assises de douche souples «Indigo soft».....	20/21
Assises de douche rigides «Indigo».....	22
Protections pour la douche «Aquabella».....	23



Réhausse-wc en mousse injectée

Le Réhosoft facilite le positionnement des personnes pour lesquelles la station assise constitue une difficulté (patients opérés des hanches, personnes âgées, amputés).

Un confort optimal est assuré par les qualités techniques des matériaux utilisés :

- surface imperméable
- souplesse de la mousse
- contact agréable de l'enveloppe



Conçu par un designer professionnel reconnu, le Réhosoft a été élaboré dans un souci égal de sécurité et de modernité.





Réhosoft

5



Recommandé pour :

- les amputés
- les personnes âgées
- les patients opérés de la hanche
- les personnes ayant des difficultés à s'asseoir

Atouts :

- grande stabilité
- propriétés antimicrobiennes
- facilité d'utilisation et de mise en place
- mousse injectée pour un confort optimal

Son installation est facilitée par un positionnement immédiat, il est adaptable à la très grande majorité des cuvettes.

Mousse injectée & enveloppe PVC



Design et poignée ergonomique



Réhosoft

09/7300

Réhosoft avec couvercle

09/7301

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (l x L x H)	400 x 420 x 170 mm
Poids maximal de l'utilisateur	120 kg
Hauteur de surélévation	115 mm
Poids	2,4 kg
Composition	Mousse polyuréthane et PVC
Couvercle	Polypropylène
Nettoyage	Tous produits courants et eau savonneuse
Désinfection	Aérosol de désinfection ou dilution chlorée



RÉHAUSSE - WC

REHO₂FIX

6

Composés en polymère injecté, le REHO₂FIX et le REHOFIX présentent une surface lisse. Dénuée d'aspérité, la matière procure une agréable sensation au toucher.

La prise en compte, lors de la conception du produit, des exigences d'hygiène, d'ergonomie et d'esthétique, font du REHOFIX et du REHO₂FIX des produits innovants qui associent sécurité d'utilisation, fiabilité dans le temps, harmonie de la ligne et qualité de finition.



Clips et molettes ajustables



REHO₂FIX

09/7403

REHO₂FIX avec couvercle

09/7404

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (l x L x H)	420 x 425 x 180 mm
Poids maximal de l'utilisateur	145 kg
Hauteur de surélévation	100 mm
Poids	1,2 kg
Composition	Polymère injecté
Nettoyage	Tous produits courants et eau savonneuse
Désinfection	Aérosol de désinfection ou dilution chlorée



REHOFIX

7

Le REHOFIX et le REHO2FIX répondent aux impératifs d'hygiène nécessitant un entretien facile et régulier. Du fait de leur étanchéité totale, le rinçage à l'eau est possible.

Le REHOFIX et le REHO2FIX sont adaptables sur la très grande majorité des cuvettes de toilettes. Leur mise en place est très pratique et le réglage, réalisable de l'extérieur, apporte une incontestable amélioration des conditions d'utilisation.



Clips ajustables



REHOFIX	09/7400
REHOFIX avec couvercle	09/7401

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (l x L x H)	420 x 425 x 180 mm
Poids maximal de l'utilisateur	145 kg
Hauteur de surélévation	100 mm
Poids	1,2 kg
Composition	Polymère injecté
Nettoyage	Tous produits courants et eau savonneuse
Désinfection	Aérosol de désinfection ou dilution chlorée





RÉHAUSSE - WC «Classiques»

8

Sécurité, facilité d'emploi, mise en place aisée, la conception des réhausse-WC PHARMAOUEST INDUSTRIES permet une utilisation par toutes les personnes qui souffrent de traumatismes des hanches et qui connaissent des problèmes de position assise.

Simple



Équerres



La diversité des fixations, simples, équerres, molettes et clips offrent des possibilités variées adaptées aux souhaits de l'utilisateur.

Molettes



Clips






Les classiques

9

Avec les hauteurs 7, 13 et 15 cm, les réhausse-WC PHARMAOUEST INDUSTRIES répondent à la grande majorité des demandes en matière de réhausse-wc.

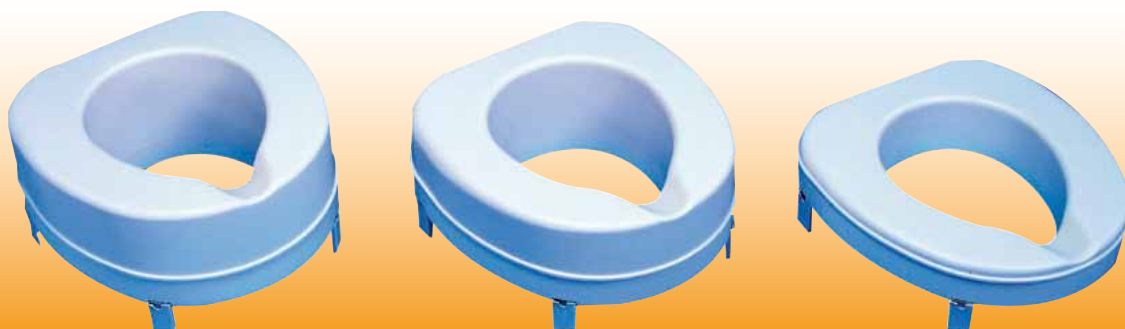

	Hauteur 7 cm	Hauteur 13 cm	Hauteur 15 cm
<i>Simple</i>	09/7180/07	09/7180/13	09/7180/15
<i>Simple avec couvercle</i>	09/7181/07	09/7181/13	09/7181/15
<i>Avec équerres</i>	09/7182/07	09/7182/13	09/7182/15
<i>Avec équerres et couvercle</i>	09/7183/07	09/7183/13	09/7183/15
<i>Avec molettes</i>	09/7184/07	09/7184/13	09/7184/15
<i>Avec molettes et couvercle</i>	09/7185/07	09/7185/13	09/7185/15
<i>Avec clips</i>	09/7186/07	09/7186/13	09/7186/15
<i>Avec clips et couvercle</i>	09/7187/07	09/7187/13	09/7187/15

La forme standard universelle s'adapte sur les cuvettes récentes comme sur les plus anciennes.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (l x L)	370 x 385 mm
Poids maximal de l'utilisateur	120 kg
Composition	Polymère injecté
Nettoyage	Tous détergents
Désinfection	Dilution chlorée





ACCESSOIRES D'HYGIÈNE

10



Bassin avec couvercle **09/7010**

Bassin sans couvercle **09/7020**

Urinal homme **09/7080**



Bock à douche 2 litres, nu **09/7030**

Bock à douche 2 litres, avec canule et tuyau **09/7040**

Urinal femme **09/7070**



Bidet **09/7050**

Pied métallique pour bidet **09/7060**

Haricot **09/7120**



Seau hygiénique blanc avec porte-bloc

09/7110



ACCESSOIRES D'HYGIÈNE

11

Bocal à urine 09/7170



Flacon pissette 125 c/c 09/7130



Flacon pissette 250 c/c 09/7140



Flacon pissette 500 c/c 09/7150



Inhalateur 09/7160



Gobelet de malade 09/7100



Crachoir avec couvercle 09/7090





BASSIN CONFORT

Produit breveté, le Bassin Confort permet, grâce à une conception soigneusement étudiée, une utilisation fréquente au quotidien. Il rend plus aisé le positionnement du patient et facilite l'intervention des proches ou du personnel soignant.

La forme adaptée à l'anatomie permet une répartition sur trois zones du poids de l'assise et diminue celui-ci de moitié au niveau du coccyx (Test ICIF 99).

La conception, en forme de "pelle", permet de glisser le bassin sous le patient en évitant des mouvements souvent pénibles.

L'aspect profilé du Bassin Confort permet de conserver une position correcte du dos.

Par sa légèreté et son ergonomie, le Bassin Confort diminue les efforts du personnel soignant.

- Forme anatomique
- Facilité de préhension
- Moindre mobilisation du patient



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	80 mm
Longueur	400 mm
Largeur	290 mm
Contenance	2,2 L maximum
Poids maximal	220 kg
Composition	Polymère
Stérilisation	Autoclave 130°C
Nettoyage	Eau et détergent habituel

Blanc avec couvercle	09/5000
Bleu avec couvercle	09/5005
Blanc sans couvercle	09/5010
Bleu sans couvercle	09/5015
Couvercle blanc	09/5020
Couvercle bleu	09/5025



URINAL Urolis

13

Avec système exclusif anti-déversement

Urinal masculin



- Position stable
- Grande contenance
- Forme ergonomique

Poignée ergonomique



Capuchon anti-déversement



Ouverture ergonomique



Bouchon de vidange




Joint élastomère

Système anti-déversement



Adaptateur féminin

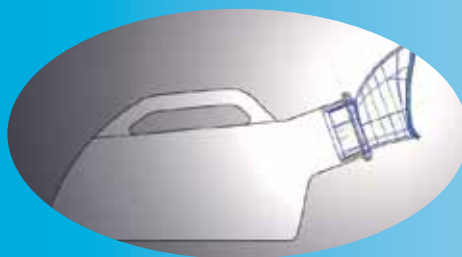

CARACTÉRISTIQUES

Profondeur	240 mm
Largeur (arrière)	140 mm
Largeur (avant)	85 mm
Hauteur	140 mm
Longueur (hors tout)	300 mm
Contenance	1,5 l
Nettoyage	Eau et détergent habituel

Urinal masculin 09/8000

Adaptateur féminin 09/8003

SIÈGES DE BAINS MANUELS

14


La toilette, moment essentiel du quotidien, doit être effectuée dans les meilleures conditions. Réalisés avec l'exigence d'associer fiabilité, confort et esthétique, ces sièges de bain facilitent les transferts en toute sécurité.

Les sièges de bain pivotants se composent d'une assise percée (PVC injecté) antidérapante fixée sur une structure acier revêtue époxy. Ils sont pourvus d'une visserie inoxydable.

L'amplitude de rotation (360°) permet l'installation et le positionnement de la personne sans effort.

Le parfait équilibre de l'ensemble est assuré par les deux axes de stabilisation latéraux, réglables à l'intérieur de la baignoire, ainsi que par les supports extérieurs antidérapants.

- Amplitude de rotation 360°
- 2 axes de stabilisation latéraux
- Assise percée antidérapante

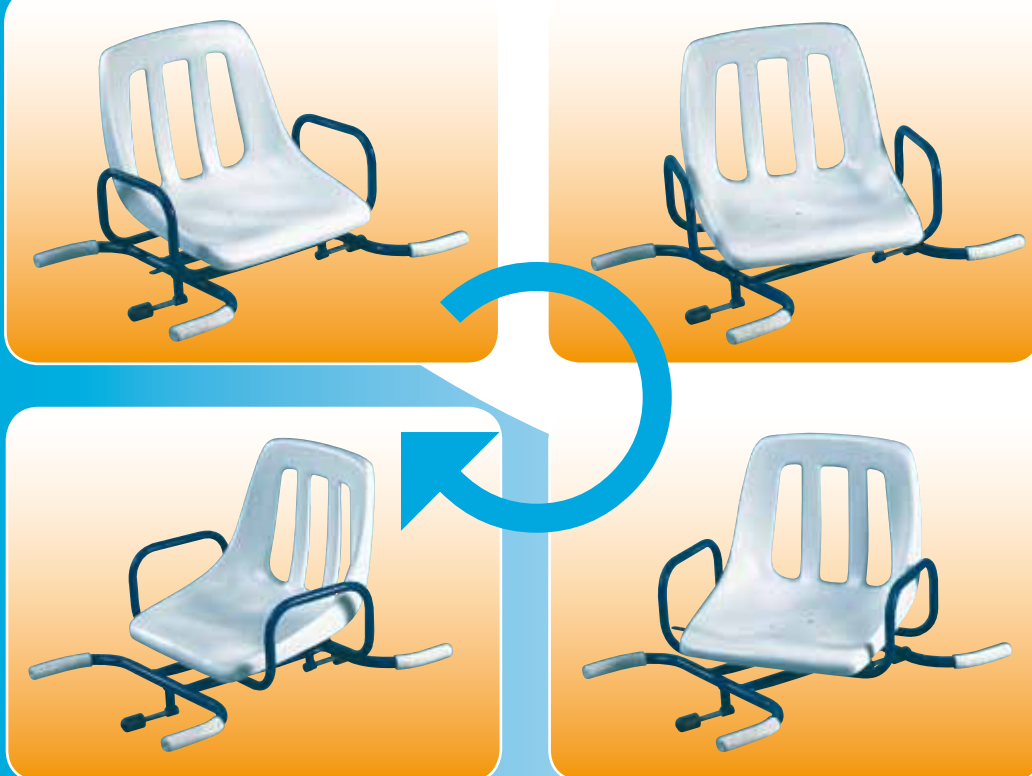

CARACTÉRISTIQUES

Siège	PVC injecté
Châssis	Structure acier/époxy
Visserie	Inoxydable
Nettoyage	Eau et détergent habituel
Désinfection	Dilution chlorée



SIÈGES DE BAINS MANUELS

15

Siège de baignoire pivotant



Assise surbaissée, 8 cm entre la baignoire et l'assise

Réf : 30/9010

CARACTÉRISTIQUES

Accoudoirs	Ø 20 mm
Châssis	Ø 25 mm
Largeur (hors tout)	740 mm
Largeur entre accoudoirs	500 mm
Hauteur dossier	350 mm
Profondeur assise	350 mm
Poids supporté	100 kg
Poids du siège	7,8 kg

Siège de baignoire pivotant



Accoudoirs relevables

Réf : 30/9015

CARACTÉRISTIQUES

Accoudoirs	Ø 20 mm
Châssis	Ø 25 mm
Largeur (hors tout)	740 mm
Largeur entre accoudoirs	500 mm
Hauteur dossier	350 mm
Profondeur assise	350 mm
Poids supporté	100 kg
Poids du siège	7,3 kg

Siège de baignoire fixe



Réf : 30/9020

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	Ø 25 mm
Largeur (hors tout)	740 mm
Hauteur dossier	350 mm
Profondeur assise	350 mm
Poids supporté	100 kg
Poids du siège	3,9 kg

Neptune

Prendre un bain peut être un moment très agréable. Un bain chaud thérapeutique détend les muscles et concourt à leur mobilité, tout en faisant disparaître maux et douleurs.

Pour les personnes à mobilité réduite, l'entrée et la sortie du bain constituent souvent un problème.

Le siège élévateur de bain **Neptune** offre une solution pratique alliant sécurité, confort et fiabilité, pour permettre à l'utilisateur de conserver son indépendance.

La forme et le style moderne de **Neptune** associent pratique et fonctionnalité afin de proposer un siège élévateur compact, léger et portable.

Dossier fixe



Siège de bain Neptune

30/9100

Batterie

Entrée : 14.4V c.c. nominal - 1 A

Sortie : 14.4V c.c. nominal - 7 A maxi

Chargeur batterie

Entrée : 100-240 V c.a. 50-60HZ - 1 A

Sortie : 14.4V c.c. nominal - 1 A

Transport et stockage

Poids total emballé : 12.3 Kg

Volume expédition : 0,02 m³

Températures : Max. 40°C - Min. -10°C



Moteur intégré

Le siège **Neptune** dispose d'un moteur fixe dont le fonctionnement silencieux, régulier et fiable procure une sensation relaxante et rassurante lors du bain.



Rabats latéraux

Les rabats latéraux larges et solides facilitent le transfert sur et hors du siège. Leur forme légèrement arrondie offre une protection à l'utilisateur pendant la montée ou la descente du siège.



Boîtier de commande étanche

Le boîtier de commande est pourvu de deux grands boutons faciles à manipuler. Un voyant lumineux indique l'état de charge de la batterie. La batterie est facile à retirer et doit être rechargée à l'extérieur de la salle de bain.



Pieds-ventouses

Les pieds-ventouses en caoutchouc naturel de **Neptune** sont larges, plus flexibles que les autres modèles disponibles. Ils permettent de fixer le siège **Neptune** sur des surfaces incurvées et s'adaptent à la plupart des formes et des tailles de baignoires.



Hygiène

Le siège **Neptune** a été conçu pour un nettoyage sans effort. La surface lisse du siège et du cadre permet un entretien facile.



Neptune

Le siège élévateur de bain **Neptune** est composé d'un siège ergonomique et d'un dossier assurant un confort optimal, même durant des bains prolongés. Pour le bien-être de l'utilisateur, le siège de bain peut se lever ou se baisser en toute sécurité.

Plus d'espace pour les jambes

Neptune est différent car il permet de garder un espace suffisant pour étendre les jambes. Son design particulier, peu encombrant, permet à l'utilisateur de s'asseoir à l'arrière de la baignoire et de descendre vraiment très bas. Une personne de grande taille ou ayant des difficultés de mouvement peut, elle aussi, savourer le plaisir de prendre un bain chaud.



CARACTÉRISTIQUES

Poids maximal supporté	160 kg
Largeur d'assise avec rabats	730 mm
Largeur d'assise sans rabats	350 mm
Hauteur d'assise (position haute)	435 mm
Hauteur d'assise (position basse)	70 mm
Hauteur du dossier	735 mm
Degré de protection	IP 68

GARANTIE

2 ans

Dans les conditions
normales d'utilisation



ÉLÉVATEUR DE BAIN ÉLECTRIQUE

18

AQUILA

L'élévateur de bain **Aquila** est équipé d'un dossier haut, qui s'incline automatiquement lors de la descente et se redresse lors de la montée. Le moteur, alimenté par une batterie rechargeable, évite toute installation électrique dans la salle de bain.

Dossier inclinable



Élévateur Aquila

30/9150

Housse matelassée

30/9155



Moteur intégré

Le siège **Aquila** dispose d'un moteur fixe dont le fonctionnement silencieux, régulier et fiable procure une sensation relaxante et rassurante lors du bain.



Rabats latéraux

Les rabats latéraux larges et solides facilitent le transfert sur et hors du siège. Leur forme légèrement arrondie offre une protection à l'utilisateur pendant la montée ou la descente du siège.



Batterie étanche

La télécommande s'emboîte sur la batterie. Munie de ventouses, la pile se fixe sur le bord de la baignoire ou contre un mur carrelé. La batterie doit être rechargée à l'extérieur de la salle de bain.



Pieds-ventouses

Les pieds-ventouses en caoutchouc naturel de **Aquila** sont larges, plus flexibles que les autres modèles disponibles. Ils permettent de fixer le siège **Aquila** sur des surfaces incurvées et s'adaptent à la plupart des formes et des tailles de baignoires.



Hygiène

Pièces en ABS, garanties antimicrobien et anti-moisissures. Ce siège se nettoie de façon régulière avec des produits d'entretien non abrasifs.

Batterie

Entrée : 14.4V c.c. nominal - 1 A

Sortie : 14.4V c.c. nominal - 7 A maxi

Chargeur batterie

Entrée : 100-240 V c.a. 50-60HZ - 1 A

Sortie : 14.4V c.c. nominal - 1 A

Transport et stockage

Poids total emballé : 13 Kg

Volume expédition : 0,07 m³

Températures : Max. 40°C - Min. -10°C



Aquila

19

Principe d'utilisation

Le siège de bain élévateur sera élevé du fond de la baignoire jusqu'en haut, puis abaissé dans l'eau. Après le bain, le siège remontera la personne en haut de la baignoire, puis s'abaissera jusqu'au fond de celle-ci, pour y être rangé.

Sécurité

- Dispositif «stop descente» en cas de batterie faible
- Voyant de charge sur boîtier de commande
- Stable grâce aux 4 larges ventouses



CARACTÉRISTIQUES

Poids maximal supporté	140 kg
Largeur d'assise avec rabats	718 mm
Largeur d'assise sans rabats	360 mm
Hauteur d'assise (position haute)	440 mm
Hauteur d'assise (position basse)	75 mm
Hauteur du dossier	676 mm
Angle d'inclinaison	35°
Degré de protection	IP 66

GARANTIE

2 ans

Dans les conditions
normales d'utilisation

Pourvus d'une assise en mousse de polyuréthane souple, les fauteuils de douche «INDIGO•SOFT» procurent un confort optimal. Réglables en hauteur, pliants ou rabattables et équipés de quatre embouts pour une meilleure sécurité, ils seront faciles à installer et à ranger dans les douches étroites.

Fauteuil de douche pliant

Réf : 30/9510



GARANTIE

1 an

Dans les conditions normales d'utilisation

- Siège réglable en hauteur
- Poids maximum supporté : 120 Kg
- Accoudoirs fixes pour plus de sécurité
- Fauteuil pliant pour un rangement facile
- Dossier anatomique pour optimiser le confort
- Assise anatomique pour faciliter la toilette intime
- Siège équipé de 4 embouts pour une meilleure stabilité

Assise souple



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (L x P)	438 x 378 mm
Dimensions totales	500 x 400 x 925 - 1025 mm
Hauteur de l'assise	500 - 600 mm
Poids	5,8 kg



Siège de douche mural

Réf : 30/9520



GARANTIE

1 an

Dans les conditions normales d'utilisation



Assise souple



- Siège réglable en hauteur
- Poids maximum supporté : 120 Kg
- Se replie contre le mur pour un rangement facile
- Assise anatomique pour faciliter la toilette intime

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (L x P)	438 x 378 mm
Dimensions totales	520 x 495 x 475 - 575 mm
Hauteur de l'assise	460 - 560 mm
Poids	4 kg

Tabouret de douche

Réf : 30/9500



- Siège réglable en hauteur
- Poids maximum supporté : 120 Kg
- Accoudoirs fixes pour plus de sécurité
- Assise anatomique pour faciliter la toilette intime
- Siège muni de 4 embouts pour une meilleure stabilité

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (L x P)	438 x 378 mm
Dimensions totales	530 x 410 x 665 - 765 mm
Hauteur de l'assise	500 - 600 mm
Poids	4 kg

INDIGO

Grâce à leur assise anatomique, les sièges de douche «INDIGO» procurent un confort et une stabilité dans la position assise. Réglables en hauteur, pliants ou rabattables et équipés de ventouses pour une sécurité optimale, ils seront faciles à installer et à ranger dans les douches étroites.



Fauteuil de douche pliant

Réf : 30/9610

- Siège réglable en hauteur
- Poids maximum supporté : 120 Kg
- Fauteuil pliant pour un rangement facile
- Dossier anatomique pour optimiser le confort
- Assise anatomique pour faciliter la toilette intime
- Siège muni de 4 embouts pour une meilleure stabilité

Largeur	530 mm
Profondeur	490 mm
Assise	438 x 378 mm
Hauteur ajustable	480 - 580 mm

GARANTIE

1 an

Dans les conditions normales d'utilisation



Siège de douche mural rabattable

Réf : 30/9620

- Siège réglable en hauteur
- Poids maximum supporté : 120 Kg
- Se replie contre le mur pour un rangement facile
- Assise anatomique pour faciliter la toilette intime

Largeur	500 mm
Profondeur	495 mm
Assise	438 x 378 mm
Hauteur ajustable	460 - 560 mm



Tabouret de douche

Réf : 30/9600

- Hauteur et largeur ajustable
- Poids maximum supporté : 120 Kg
- Accoudoirs fixes pour plus de sécurité
- Assise anatomique pour faciliter la toilette intime
- Siège muni de 4 embouts pour une meilleure stabilité

Largeur	545 mm
Profondeur	450 mm
Assise	438 x 378 mm
Hauteur ajustable	480 - 580 mm



AQUABELLA

Dispositif de protection pour plâtre et pansement

Aquabella est la protection optimale pour tous les patients avec blessures aux mains, aux bras, aux pieds, aux jambes et à la tête (fracture, ulcère, brûlure, plaie d'opération...).

Le pansement ou le plâtre, sous la feuille plastique, est tenu au sec pendant la douche.

Grâce à l'élastique soudé, **Aquabella** peut être ajusté d'une seule main, par-dessus le pansement, et ceci sans l'aide d'une tierce personne. Cette fixation, sans ruban adhésif sur la peau, évite les risques d'allergie.

L'efficacité de la protection contre l'humidité évite l'infection de la blessure. **Aquabella** est l'aide idéale pour toute utilisation dans les hôpitaux, cliniques et soins à domicile.

- réutilisable
- ajustable avec une seule main
- sans colle ni ruban adhésif



ADULTE

2 x main, pied, bras court	295 x 480 mm	21/21100
2 x jambe courte, bras long	295 x 600 mm	21/21200
2 x jambe longue	355 x 1100 mm	21/21300
1 x tête + oreilles	320 x 220 mm	21/21400

ENFANT

2 x bras	240 x 600 mm	21/21500
2 x jambe	280 x 800 mm	21/21600
1 x tête	310 x 210 mm	21/21700



FABRICANT FRANÇAIS

PHARMAOUEST INDUSTRIES

Z.A. ACTIPOLE 2 - B.P.12
F- 35540 MINIAC-MORVAN
FRANCE

TÉL. : +33 (0)2 99 82 21 21
FAX : +33 (0)2 99 82 15 45
FAX VERT : 0800 87 70 45
www.pharmaouest.com

Mail :

contact@pharmaouest.com
export@pharmaouest.com
canada@pharmaouest.com