

Colibri®



reddot award 2014
winner

Une balade colorée sans
effort, en toute sécurité !

INVACARE
Yes, you can.®

Le micro scooter *Invacare Colibri* est élégant, simple d'utilisation et coloré : il est idéal pour les utilisateurs en quête d'indépendance. Grâce à l'inédit système breveté *Invacare LiteLock™*, le **Colibri** est démontable facilement sans outils. Son faible encombrement lui offre une grande maniabilité. Il est idéal pour une utilisation en intérieur et dans les espaces publics aménagés. Dans sa version Outdoor, il vous apporte plus d'autonomie et un meilleur franchissement.

Le **Colibri** est également disponible en version 3 roues afin d'optimiser l'espace réservé aux membres inférieurs. Il est personnalisable grâce aux carénages démontables disponibles en plusieurs coloris tendances.



Options et caractéristiques



Démontage facile

Moins d'une minute est le temps nécessaire pour démonter le **Colibri** pour le transport. Il en est de même pour l'assemblage.

Grandes roues et grandes batteries

Améliore l'autonomie et le franchissement du scooter. Disponible en option.

Plus de confort

L'assise rembourrée assure à l'utilisateur une conduite relaxante tout en douceur. Elle est également pivotante sur 360°.

Données techniques


Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

| | Largeur d'assise | Profondeur d'assise | Hauteur siège/plancher | Hauteur de dossier | Largeur hors-tout | Longueur hors-tout | Poids du scooter | Poids max utilisateur |
|---------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------|
| <i>Invacare Colibri</i> 4 roues | 465 mm | 400 mm | 390 - 430 mm | 385 mm | 505 mm | 1010 mm | 44 kg ¹ (Batt. 12Ah) 49 kg ¹ (Batt. 18Ah) | 136 kg |
| <i>Invacare Colibri</i> 3 roues | 465 mm | 400 mm | 390 - 430 mm | 385 mm | 505 mm | 1010 mm | 42 kg ¹ (Batt. 12Ah) 46 kg ¹ (Batt. 18 Ah) | 136 kg |

| | Batteries | Diamètre de giration | Franchissement | Pente max sécurité | Puissance moteurs | Autonomie | Vitesse |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|--|---------|
| <i>Invacare Colibri</i> 4 roues | 2 x 12 Ah 2 X 18 Ah | 2200 mm | 45 mm ² 50 mm ³ | 6° / 10.5% | 200 W | 11 km (Batt. 12Ah) 25 km (Batt. 18Ah) | 8 km/h |
| <i>Invacare Colibri</i> 3 roues | 2 x 12 Ah 2 X 18 Ah | 1940 mm | 45 mm ² 50 mm ³ | 6° / 10.5% | 200 W | 11 km (Batt. 12Ah) 25 km (Batt. 18Ah) | 8 km/h |



Coloris

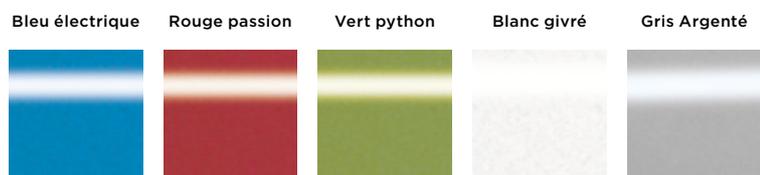

Système de démontage breveté LiteLock™

1. Poids de l'élément le plus lourd : 15,6 kg (partie avant)
2. avec petites roues (200x50mm)
3. avec grandes roues (210x65mm)