

**ERGO**  
CONCEPT



**ERGO**  
08 L 2.0



Le nouveau fauteuil  
**Multi RÉGLAGES**  
**ULTRA COMPACT**


# ERGO

08 L 2.0

## SYSTÈME DE PLIAGE RÉINVENTÉ

3 secondes

En un seul geste !

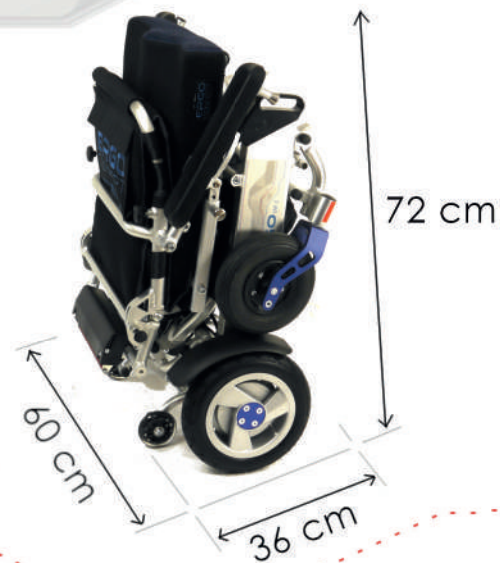

## REPOSE-PIEDS AMOVIBLES

Double-palettes

18 cm



Repose-pieds ajustables:  
- en hauteur  
- en profondeur (18 cm)  
- facile à enlever

## DOSSIER RÉGLABLE EN HAUTEUR

de 39 à 52 cm

Sangle supplémentaire  
incluse



Un concentré d'innovations !



## ACCOUDOIRS & JOYSTICK AJUSTABLES

4 positions

Joystick réglable en profondeur : 0, 2, 4 ou 6 cm  
Largeur entre accoudoirs:  
46 à 50 cm

## SYSTÈME DE PLIAGE INCLINABLE REPENSÉ

De 15 à 40°

Accessible, facile et fluide, le verin permet de choisir l'inclinaison idéale du dossier.



Le système Ergo Drive compense, en toute fluidité, les désagréments de conduite qui peuvent survenir (pentes, sols irréguliers...).

Le module de puissance adapte la vitesse de chaque roue aux informations du joystick et permet une conduite optimale, moins fatigante pour l'utilisateur.



Une conduite confortable et maîtrisée en toutes circonstances.



Ergo 08L 2.0 est une nouvelle version du fauteuil électrique multi-réglages E08L qui présente deux innovations majeures. L'inclinaison du dossier se fait désormais, tout en douceur, grâce au nouveau système de **verin hydraulique** qui permet de choisir la position idéale pour l'utilisateur. Mais aussi le lancement de la **technologie Ergo Drive** qui offre un confort de conduite totalement amélioré, une gestion optimale de la batterie et une moindre fatigue physique et cognitive pour l'utilisateur. Une révolution pour les personnes à mobilité réduite.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	23,5 kg / 20,5 kg*	Autonomie	15 à 30 Km
Largeur hors-tout	60 cm	Vitesse max.	6 km/h
Longueur hors-tout	80 cm / 105 cm	Pente de sécurité	6°
Dimensions assise	42 x 38 x 5 cm	Puissance	200W 24V 9,09 Ah
Dimensions plié	72 x 60 x 36 cm	Rayon braquage	72 cm
Temps de pliage	3 secondes	Charge max.	115 kg
Hauteur Sol/Siège	52 cm	Largeur  e  accoudoirs	46 à 50 cm

\* 20,5 Kg + 3 kg (batterie et textile) - Compatible transport aérien 